

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podpórka czterokołowa stalowa

Kod produktu TGR-R RS 881



1. Wykonanie


Podpórka czterokołowa, składana wykonana z ramy stalowej malowanej proszkowo. Wyposażona w hamulce z zaciskiem postojowym, siedzisko ze zdejmowaną tacką oraz koszyk. Posiada pełne gumowe koła o średnicy 8'' oraz regulowane na wysokość ręczki zakończone anatomicznymi uchwytami.

Zestaw zawiera:

- Ramę podpórki wraz z siedziskiem
- Dwa uchwyty z hamulcami
- Koszyk
- Tackę
- Śruby blokujące- 2 szt.

Elementy podpórki:

- a. uchwyt
- b. hamulec
- c. śruba blokująca
- d. blokada składania ramy
- e. zawias poprzeczny
- f. siedzisko
- g. uchwyt na kule
- h. górna regulacja hamulca
- i. dolna regulacja hamulca

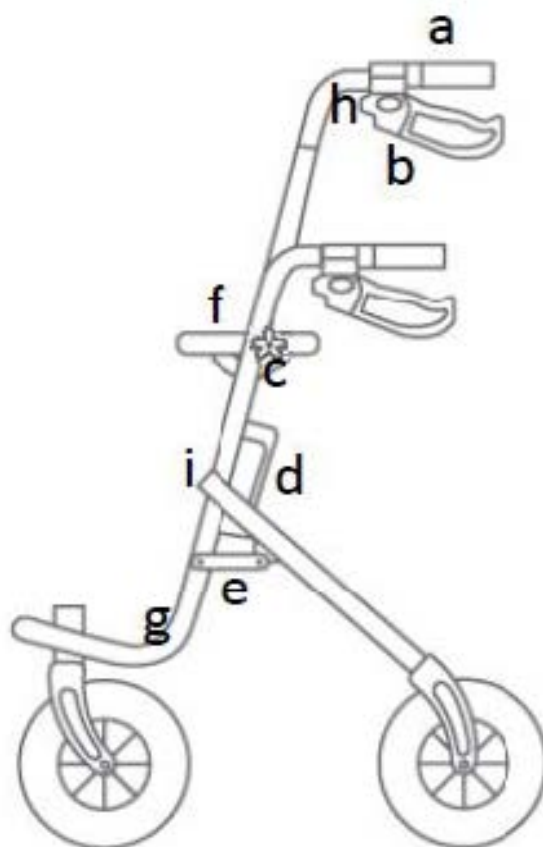

2. Zastosowanie

Podpórka czterokołowa jest sprzętem pomocniczym, przeznaczonym dla osób o obniżonej sprawności ruchowej, które potrzebują stabilnego podparcia i asekuracji podczas chodzenia. Zalecana jest także dla osób starszych, jako pomoc w utrzymaniu równowagi, poprawy komfortu

poruszania się i zapewnienia bezpieczeństwa przed upadkiem. Zastosowanie podpórki wpływa pozytywnie na powrót do aktywności osób mających problemy z lokomocją lub pionizacją. Gwarantuje lepszą stabilność, podparcie i bezpieczeństwo podczas chodzenia.

3. Montaż

Rozłożenie i złożenie podpórki

- W pierwszej kolejności należy zamontować uchwyty w otworach montażowych na odpowiedniej wysokości dokręcając śruby blokujące. Oś uchwytów powinna być ustawiona równolegle do tylnych kół a linki hamulców powinny znajdować się z przodu.
- Podpórkę należy rozłożyć poprzez dociśnięcie belki poprzecznej znajdującej się pod siedziskiem, tak aby zawiasy znajdujące się na zewnętrznych stronach podpórki były całkowicie rozłożone.
- Koszyk należy zawiesić w części przedniej, poniżej siedziska podpórki.
- Tackę można zamontować na siedzisku tak, aby zaczepy tacki znalazły się w otworach montażowych.
- Należy zdjąć plastikowe ochraniacze z kół.
- Aby złożyć podpórkę do transportu należy w pierwszej kolejności uruchomić hamulec postojowy, energicznie pociągając za uchwyt w dół. Następnie należy jednocześnie docisnąć blokadę składania podpórki znajdującą się po prawej stronie ramy i pociągnąć do góry za belkę poprzeczną. Można zdemontować koszyk oraz tackę.

Funkcja hamulców

- Aby zatrzymać podpórkę należy pociągnąć uchwyt hamulca do góry w kierunku uchwytu, następnie przytrzymać.
- W czasie postoju lub korzystania z siedziska należy zablokować hamulec zaciskiem postojowym pociągając uchwyt hamulca w dół.
- Aby zwolnić hamulec należy pociągnąć uchwyt hamulca w górę.

Regulacja wysokości uchwytów

Aby wyregulować wysokość uchwytów, należy odkręcić śruby blokujące znajdujące się na zewnętrznych stronach ramy, wybrać odpowiednią

wysokość rurki i ponownie dokręcić śruby blokujące. Uchwyty należy ustawić na tej samej wysokości.

Regulacja hamulców

Górna regulacja hamulca: Należy odkręcić uchwyt linki, podciągnąć ją na odpowiednią odległość i następnie zablokować za pomocą dokręcenie śruby zaciskowej. **Dolna regulacja hamulca:** Należy za pomocą klucza płaskiego poluzować śrubę mocującą, pociągnąć za czarną linkę hamulca tak, aby wyregulować napięcie linki następnie dokręcić śrubę mocującą.

4. Specyfikacja techniczna

Szerokość całkowita	57 cm
Głębokość całkowita	65 cm
Wymiary siedziska	38 cm x 16 cm
Wysokość siedziska od podłoża	60 cm
Regulacja wysokości uchwytów	75-98 cm
Waga	10,8 kg
Max obciążenie	135 kg
Max obciążenie koszyka na zakupy	12 kg
Kolor ramy	ciemnoniebieski

5. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z podpórki, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

6. Konserwacja

- Ramę podpórki należy czyścić wilgotną szmatką, a następnie dokładnie osuszyć.
- Nie należy używać ostrych środków polerskich, gdyż grozi to zniszczeniem powłok zabezpieczających.
- Należy na bieżąco usuwać zanieczyszczenia z ruchomych elementów podpórki (zawiasów, śrub zaciskowych, blokad).

7. Dane dotyczące gwarancji

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

8. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.
Dowiedz się więcej na **www.timago.com**

Dziękujemy za wybór Timago!



Timago International Group
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa
ul. Karpacka 24/12
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00

F.: +48 33 499 50 11

E.: info@timago.com



Wydanie II, data aktualizacji 29.03.2021